



RC4-1

**Návod k použití
Dálkový ovladač RC4-1**

Váš dálkový ovladač a ostatní díly nemusí vypadat přesně stejně, jak jsou zobrazeny v tomto návodu. Vyhradujeme si právo provádět určité změny podle potřeby.



Sluchadla a jejich příslušenství včetně baterií by se neměla vyhazovat do běžného domácího odpadu. Pro radu, jak správně likvidovat Vaše sluchadla a baterie, se prosím obraťte na Vašeho distributora sluchadel Widex.

Contents

Váš nový dálkový ovladač RC4-1	4
Baterie	8
Typ baterie.	8
Vložení baterií.	9
Výměna baterií	9
Zapnutí RC4-1	10
Hlasitost.	13
Nastavení hlasitosti	13
Ztišení sluchadla	15
Poslechové programy	16
Záznam události (funkce Event log).	21
Minutka	22
Péče o Váš RC4-1.	24
Několik dobrých rad.	26
Problémy a jejich odstranění.	27
Příslušenství	28
Prohlášení o shodě	30
Symbyly	32

Váš nový dálkový ovladač RC4-1

Doufáme, že budete s dálkovým ovladačem pro Vaše sluchadlo Widex spokojeni. V tomto návodu k použití najdete informace, jak jej správně používat. Abyste maximálně využili jeho schopnosti, doporučujeme přečíst si celou brožurku.


Dálkový ovladač umožňuje jednoduchý přístup k funkcím sluchadla těm, kteří mají problém ovládat svoje závěsná (BTE) a zvukovodová (ITE) sluchadla nebo dalším (partnerům, zdravotníkům, opatrovatelům), kteří by mohli za používání sluchadel odpovídat.

Váš dálkový ovladač byl v průběhu seřizování Vašich sluchadel naprogramován, takže by měl v různých situacích dobře fungovat.

Váš dálkový ovladač je doplňkové příslušenství Vašeho sluchadla. Vaše sluchadlo můžete jednoduše ovládat bez dálkového ovládání, ale použití ovladače Vám nabízí další možnosti. Výhody dálkového ovládání Widex RC4-1 jsou:

- Na rozdíl od tlačítek na Vašem sluchadle, která jsou v uchu nebo za uchem, na ovladači můžete tlačítka lépe vidět.
- Větší tlačítka na dálkovém ovladači jsou snadněji přístupná, než malá tlačítka na sluchadle.
- Dálkový ovladač Vám umožňuje ovládat sluchadlo diskrétněji, např. z kapsy nebo kabelky.
- Také u nitroušních (CIC) sluchadel můžete nastavit hlasitost a vybrat program.

Váš dálkový ovladač RC4-1 je malý počítač, který obsahuje údaje pro různá nastavení sluchadla. Obsahuje také rádiový vysílač, který posílá zprávy do sluchadla. Mezi dálkovým ovladačem a sluchadlem nemusí být volný prostor, při používání může být ovladač např. v kapse. Ovladač můžete používat do vzdálenosti asi 1 metru.

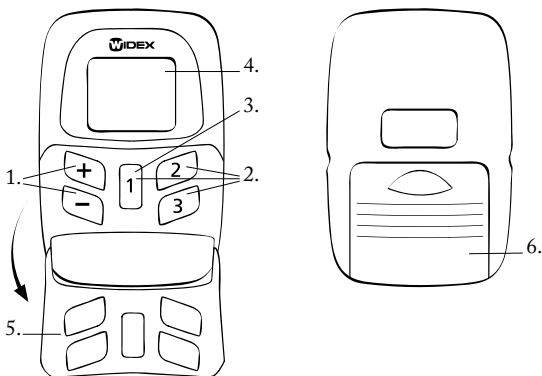

-
1. **Regulátor hlasitosti.** Tlačítka [+] a [-] jsou používána pro nastavení hlasitosti.
 2. **Výběr programu.** Tlačítka [1], [2] a [3] jsou používána pro výběr programu. Váš RC4-1 může pracovat maximálně se třemi programy.
 3. **Vypnutí/zapnutí.** Tlačítko [1] je určeno pro zapnutí dálkového ovládání. Toto tlačítko [1] umožňuje vrátit ovladač do výchozího nastavení P1 V9 (program 1, hlasitost 9).
 4. **Display.** Zobrazuje právě zvolený program (P), hlasitost (V), stav baterie dálkového ovládání.
 5. **Průhledný kryt klávesnice s otvory pro tlačítka.** Se zavřeným krytem je sníženo riziko náhodného stisknutí tlačítka. Odklopením krytu bude ovladač o něco větší a bude se lépe držet. Tlačítka jsou potom vyšší a snadněji přístupná.
 6. **Kryt baterie.**

Baterie

Typ baterie

Doporučený typ baterie pro Váš dálkový ovladač RC4-1 je:


Lithium CR 2032

Váš RC4-1 je napájen dvěma bateriemi CR2032.

Možnost zakoupení vhodných baterií konzultujte s Vaším sluchadlovým odborníkem. Povšimněte si prosím data uvedeného na balení baterií, které udává jejich životnost. Životnost baterie závisí na tom, jak často Váš dálkový ovladač používáte.

Vložení baterií

Znaménko plus (+) na bateriích pro Váš RC4-1 musí být při vkládání do prostoru pro baterie nahore.

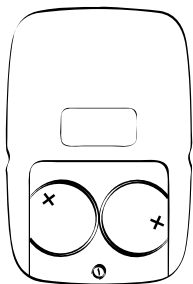

Výměna baterií


Vyměňujte vždy obě baterie současně.



Je-li baterie téměř vybitá, bude na displeji zobrazen symbol nepřetržitě. Pokud se symbol objeví pouze krátce, není nutné baterie ještě měnit.

Zapnutí RC4-1

Dálkový ovladač se zapne stisknutím tlačítka [1].
Vypne se standardně po 30 sekundách.

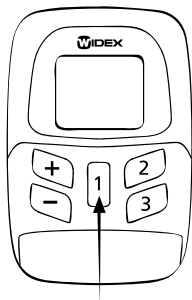

Pokud potřebujete, Váš sluchadlový odborník Vám může pomoci vybrat jiný čas, po kterém se ovladač vypne.


Po zapnutí sluchadla uslyšíte hlasovou zprávu nebo tón pro potvrzení toho, že je dálkový ovladač aktivní.

Sluchadlo je nyní nastaveno na stejnou hlasitost a stejný program, jaký byl nastaven při posledním použití dálkového ovladače.

Vysvětlení symbolů na displeji dálkového ovladače:

P	Program. Číslice za písmenem P ukazují vybraný program. Můžete vybrat mezi programy 1, 2 a 3.
V	Hlasitost (Volume). Číslice za písmenem V ukazují úroveň hlasitosti od 1 (minimum) do 13 (maximum). Pokud je za písmenem V nula, je hlasitost kompletně vypnuta, ale sluchadlo vypnuté není.

Hlasitost

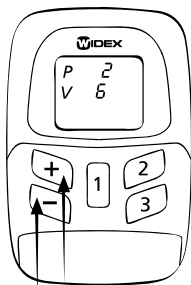

Nastavení hlasitosti

Při každé změně nastavení hlasitosti uslyšíte pípnutí.


Hlasitost zvyšujete stisknutím tlačítka [+].

Hlasitost snižujete stisknutím tlačítka [-].

Úroveň hlasitosti se objeví na displeji. Číslice za symbolem V ukazuje úroveň hlasitosti.

- Maximální úroveň hlasitosti je 13.
- Minimální úroveň hlasitosti je 1.
- 0 znamená, že je hlasitost kompletně vypnuta


Nastavení hlasitosti

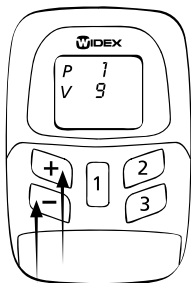

Stiskněte tlačítko [1]. Zobrazí se výchozí nastavení, P1 V9. Použijte tlačítka [+] [-] pro nastavení požadované hlasitosti. Dálkový ovladač se automaticky vypne přibližně po 30 sekundách.

Ztišení sluchadla


Váš RC4-1 můžete také použít pro úplné ztišení sluchadla.

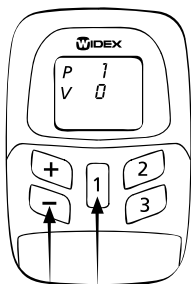

Stiskněte tlačítko [1]. Zobrazí se výchozí nastavení, P1 V9. Potom držte stisknuté tlačítko [1] a zároveň stiskněte tlačítko [-]. Vedle písmena V se zobrazí číslo 0. Pro opětovné zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko [+]. Hlasitost se nastaví na výchozí úroveň (9).

Poslechové programy

Váš dálkový ovladač RC4-1 Vám umožní vybrat si až ze tří poslechových programů. Společně s Vaším sluchadlovým odborníkem byste si měli určit, které poslechové programy jsou pro Vás užitečné. Pokud budete časem potřebovat jiné poslechové programy, je možné jejich kombinaci změnit.

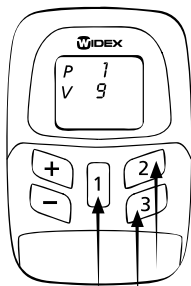

Poslechové programy můžete přepínat tlačítky [1], [2] a [3]. Číslo zvoleného programu je zobrazeno na displeji vedle písmena P (program).

Výběr programu bude indikován hlasovou zprávou, kdykoli přepnete na jiný program. Pokud máte nastavenou tónovou indikaci namísto hlasových zpráv, budete slyšet při výběru různých programů různá pípnutí:

Program 1: jedno krátké pípnutí


Program 2: dvě krátká pípnutí

Program 3: tři krátká pípnutí

V tomto návodu si můžete Vy a Váš sluchadlový odborník vyznačit, které poslechové programy máte vybrány.

Program	Název programu ve sluchadle	Poznámka
1		
2		
3		

Výběr poslechového programu

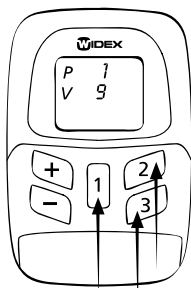


Stiskněte tlačítko [1]. Zobrazí se výchozí nastavení, P1 V9. Tlačítka [1], [2] a [3] vyberte poslechový program, který chcete používat. Dálkový ovladač se automaticky vypne přibližně po 30 sekundách.

Důležité: Prosím všimněte si, že pokud nastavujete hlasitost a programy u Vašeho sluchadla střídavě dálkovým ovládáním a tlačítka na sluchadle, může dálkový ovladač zrušit nastavení, které bylo dříve provedeno tlačítky umístěnými na sluchadle.

Příklad: Dálkovým ovladačem nastavíte hlasitost nebo poslechový program. Potom vypnete dálkový ovladač. Pokud nyní regulátorem hlasitosti na sluchadle změňte hlasitost nebo přepínačem nastavíte jiný poslechový program a po nějaké době znovu zapnete dálkový ovladač, Vaše sluchadlo se nastaví podle nastavení dálkového ovladače před jeho vypnutím.

Záznam události (funkce Event log)

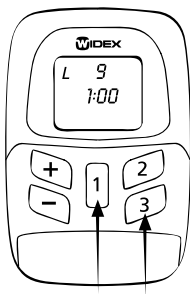


Pokud je funkce Záznam události (Event log) povolena, můžete odstartovat 1minutový záznam zvukového prostředí do Vašeho sluchadla.

Pro aktivaci funkce Záznam události (Event log), podržte stisknuté tlačítko [1] a současně stiskněte tlačítko [3].


Sluchadlo začne zaznamenávat data z prostředí, ve kterém se nacházíte. Při dalším použití funkce pro záznam události se původní záznam nahradí záznamem novým.

Minutka

Váš dálkový ovladač RC4-1 může být vybaven funkcí minutky, pokud jste se tak dohodli s Vaším sluchadlovým odborníkem. Můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí bude minutka aktivována. Zde je příklad, jak nastavit aktivaci minutky po dvou a půl hodinách.

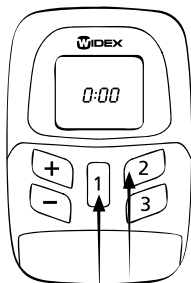

Pro zapnutí dálkového ovladače stiskněte tlačítko [(1)] na ½ sekundy. Znovu stiskněte a podržte tlačítko[(1)] a zároveň stiskněte tlačítko [(2)]. Na displeji se objeví 0:00.

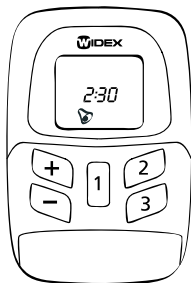

Pro výběr počtu hodin použijte tlačítka [+], [-], v tomto případě 2, a tlačítka [(2)] [(3)] pro nastavení počtu minut, v tomto případě 30. Na displeji by měl být čas 2:30. Potom stiskněte [(1)].



Na displeji se objeví malý zvonek. Pokud chcete změnit nastavení, stiskněte [(1)].

Zvonek zmizí a můžete měnit nastavení minutky pomocí tlačítek [+] [-] a [(2)] [(3)]. Pro reaktivaci minutky (malý zvonek) stiskněte tlačítko [(1)]. Pokud chcete, aby se na displeji opět zobrazil program/hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko [(1)] a zároveň stiskněte tlačítko [(2)].




Pokud se minutka spustí, budou se na displeji střídavě zobrazovat písmena AL a čísla 0 a ve sluchadle uslyšíte opakovaně asi jednou za půl minuty zapípání. Na displeji bude současně blikat zvonek, dokud alarm nevypnete.

Pro vypnutí funkce stiskněte a podržte tlačítko [(1)].

Péče o Váš RC4-1

Při dobré péči bude Váš dálkový ovladač RC4-1 spolehlivě sloužit řadu let. Zde je několik zásad, které prodlouží životnost Vašeho dálkového ovladače:

- Starejte se o svůj dálkový ovladač dle jeho hodnoty, tedy velmi pečlivě. Ukládejte jej na chladné, suché a bezpečné místo, pryč z dosahu dětí nebo domácích zvířat.
- Nikdy jej nevystavujte extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti.
- Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat Váš dálkový ovladač sami.
- Čistěte dálkový ovladač měkkým suchým hadříkem. Nikdy jej nemyjte vodou, čisticími roztoky nebo jinými tekutinami.

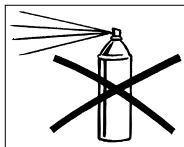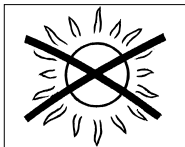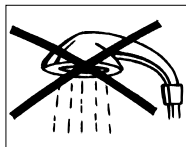

-
- Nenoste s sebou dálkový ovladač během rentgenového vyšetření, MR nebo CT vyšetření, léčby diatermií nebo během podobných radiálních léčebných procedur a nikdy nevkládejte ovladač do mikrovlnné trouby. Některé typy záření mohou ovladač poškodit. Interference z různých jiných radiových zdrojů (alarmy, poplašné systémy, mobilní telefony) jsou slabé a zaručeně Váš ovladač nepoškodí.
 - Dálkový ovladač RC4-1 není schválen pro používání v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny.

Několik dobrých rad

- Dálkový ovladač a ostatní příslušenství je potřeba chránit před dětmi, které by je mohly dávat do úst. Také baterie nepatří dětem do ruky. Použité baterie pečlivě vyhazujte. Baterie raději nikdy nevyměňujte před dětmi, neukazujte jim, kde je máte uložené.
- Nikdy nevkládejte baterie do vlastních úst a nikdy nenechte děti brát baterie do rukou. Pokud dojde k polknutí baterie, navštivte ihned lékaře.

Problémy a jejich odstranění

Před návštěvou svého sluchadlového odborníka si prosím pečlivě přečtěte tyto rady:


Pokud Váš RC4-1 nefunguje, může to být způsobeno následujícími příčinami:

- Při stisknutí tlačítek se nic nestane. Odklopte kryt pro snazší přístup k tlačítkům.
- Baterie nejsou správně vloženy. Vyměňte baterie a znovu vložte.
- Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.
- Baterie ve Vašem sluchadle je vybitá. Vyměňte ji.
- Spojení mezi Vaším sluchadlem a dálkovým ovládním se přerušuje. Vypněte a zapněte Vaše sluchadlo.

Příslušenství

K dispozici je následující příslušenství:


- Kryt baterie s klipem
- Pouzdro na dálkový ovladač
- Řemínek pro kryt s klipem

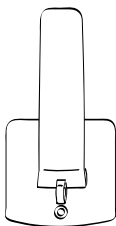

Kryt baterie s klipem




Pouzdro

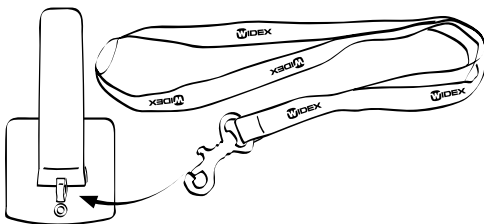

Řemínek

Kryt s klipem má svorku umožňující uchycení RC4-1 na Váš opasek a očko, ke kterému můžete připevnit řemínek, pokud chcete nosit RC4-1 na krku.

Výměna bateriového krytu

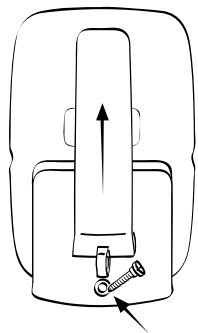

Pokud chcete vyměnit standardní bateriový kryt za kryt s klipem, musíte také vyměnit malý šroubek v krytu baterie. Po vyšroubování původního šroubku přichyťte nový kryt s klipem pomocí delšího šroubku (viz obrázek) dodávaného s tímto krytem.

Nasaďte kryt baterie tak, jak je to zobrazeno na obrázku. Nyní snadno zasunete kryt do správné pozice.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

My, Widex A/S
Ny Vestergaardsvej 25
3500 Vaerloese
Denmark

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
produkty třídy 2 (Class 2):

série: **RC4**

Počínaje výrobním číslem 400000

Modely: RC4-1 Remote control
RC4-2 Remote control

jsou v souladu s příslušnými požadavky:

R&TTE Directive 1999/5/EC of 9 March 1999

a následujícími standardy:

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 301 489-1 V1.4.1 and EN 301 489-3 V1.4.1

EN 60601-1-2:2001

IEC 60601-1-2:2001

Vaerloese, 02 December 2008

Místo a datum vydání:










Jan Tøpholm
President








V rámci EU je výrobek určen pro použití v následujících členských státech:





AT	BE	BG	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI
FR	GB	GR	HU	IE
IT	LT	LU	LV	MT
NL	PL	PT	RO	SI
SE	SK			

Symbyly

Symbyly pouřivané v materiálech k lékařským přístrojům společnosti Widex A/S (řtítky, návody k pouřítí apod.)

Symbol	Název/Popis
	Výrobce Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.
	Datum výroby Datum, kdy byl produkt vyroben.
	Datum spotřeby Datum, po jehož uplynutí produkt nelze pouřívat.
	Kód dávky Kód dávky produktu (identifikace řarže nebo dávky).
	Katalogové číslo Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
	Sériové číslo Sériové číslo produktu.*
	Chraňte před slunečním zářením Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými zdroji.

Symbol	Název/Popis
	Uchovávejte v suchu Produkt je nutné chránit před vlhkostí a deštěm.
	Dolní limit teploty Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
	Horní limit teploty Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
	Teplotní limity Nejvyšší a nejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpečně vystavit.
	Před použitím si přečtěte návod Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/ bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.
	Upozornění/Varování Text označený symbolem upozornění/varování je nutné před použitím produktu prostudovat.
	Značka WEEE Nevyhazovat do komunálního odpadu Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběrném dvoře k recyklaci.

Symbol	Název/Popis
	Značka CE Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.
	Výstraha Produkt je směrnicí R&TTE 1999/5/ES identifikován jako zařízení 2. třídy a v některých členských státech používajících označení CE se na jeho použití vážou určitá omezení.
	Značka C-Tick Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
	Rušení V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení.

*Sériové číslo je šesti- nebo sedmimístné číslo vyznačené na produktech. Sériová čísla nemusí být ve všech případech uvedena symbolem **SN**.

WIDEX Line Praha

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

WIDEX Line Brno

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz**WIDEX A/S** Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark
www.widex.com

CE 0459

Návod číslo:
9 514 0110 020 #02**MIX**
From responsible
sources
FSC® C068122