

WIDEX **UNIQUE**[™]

NÁVOD K POUŽITÍ

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE[™]

Model U-FS
S reproduktorem v uchu



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

VAŠE SLUCHADLO WIDEX®

(Vyplní lékař.)

Série vašeho sluchadla:

PROGRAMY

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Univerzální | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> Ticho | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> Ruch z dopravy | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> Ruch města | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> Večírek | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> Hudba | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> T | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> M + T | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
-

SPECIÁLNÍ PROGRAMY

- | | |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Zen | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
| <input type="checkbox"/> Telefon | <input type="checkbox"/> Rozšíření slyšitelnosti |
-

PROGRAMY SMARTTOGGLE

Zen+

Rozšíření slyšitelnosti

Telefon+

Rozšíření slyšitelnosti

POZNÁMKA

Názvy programů v tabulce jsou výchozími názvy. Pokud se rozhodnete používat některé jiné dostupné názvy, vepište tyto nové názvy do tabulky. Díky tomu budete vždy vědět, které programy máte ve svých sluchadlech.

POZNÁMKA

Než začnete toto sluchadlo používat, důkladně si přečtěte tuto příručku a příručku „Ušní sady pro sluchadla Widex“.

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| VAŠE SLUCHADLO WIDEX..... | 6 |
| Vítá vás zařízení Widex..... | 6 |
| Základní informace o vašem sluchadle..... | 6 |
| Důležité bezpečnostní informace..... | 7 |
| SLUCHADLO..... | 10 |
| Indikace pro použití..... | 10 |
| Zamýšlené použití..... | 10 |
| Baterie..... | 10 |
| Signalizace slabé baterie..... | 11 |
| Výměna baterie..... | 11 |
| Bateriové pouzdro s pojistkou proti otevření..... | 12 |
| Zvukové signály..... | 12 |
| Ztráta komunikace s druhým sluchadlem | 13 |
| Jak rozpoznat pravé od levého..... | 13 |
| Vypínání a zapínání sluchadla..... | 14 |
| Nasazení a vyjmutí sluchadla..... | 14 |
| Nastavení zvuku a programu..... | 15 |
| Programy..... | 16 |
| Program Zen..... | 18 |
| Používání telefonu se sluchadly..... | 19 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| ČIŠTĚNÍ | 20 |
| Nástroje..... | 20 |
| Čištění sluchadla..... | 20 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | 22 |
| ŘEŠENÍ POTÍŽÍ | 23 |
| PRÁVNÍ INFORMACE | 25 |
| Směrnice ES..... | 25 |
| Směrnice 2014/53/EU..... | 25 |
| Informace týkající se likvidace..... | 25 |
| Prohlášení k nařízení FCC a IC..... | 26 |
| SYMBOLY | 29 |

VAŠE SLUCHADLO WIDEX

Vítá vás zařízení Widex

Blahopřejeme k Vašemu novému sluchadlu.


Používejte své sluchadlo pravidelně, i když Vám bude nějaký čas trvat si na něj zvyknout. Budete-li jej používat jen zřídka, s největší pravděpodobností nebudete mít ze sluchadla maximální užitek.

POZNÁMKA

Vaše sluchadlo a jeho příslušenství nemusí vypadat přesně jako na obrázcích v této příručce. Vyhrazuji si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Základní informace o vašem sluchadle

Obrázek znázorňuje sluchadlo bez ušní sady. Další informace o ušní sadě naleznete v příručce k ušní sadě. Ušní sadu tvoří hadička a ušní koncovka. Je to součást sluchadla, která se zavádí do ucha.

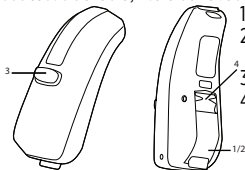

1. Vypínač
2. Příhrádka na baterie o s výstupkem pro nehet
3. Přepínač programů
4. Rozlišení pravého a levého sluchadla.
Modrá značka označuje levé sluchadlo
a červená pravé sluchadlo.

Důležité bezpečnostní informace

Než začnete svá sluchadla používat, důkladně si přečtete tento návod.



Sluchadla nebo baterie mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich spolknutí nebo nesprávnému použití. Nesprávné použití nebo spolknutí může být příčinou vážného poranění nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.



Když sluchadla nepoužíváte, vyjměte je z uší. Napomůžete tím odvětrávat zvukovod ucha a zamezíte jeho případné infekci.



Pokud se domníváte, že se u vás rozvinula infekce ucha nebo alergická reakce, ihned kontaktujte svého ušního lékaře.



Pokud je vám sluchadlo nepohodlné nebo nesedí správně a dochází k podráždění, zarudnutí apod., obraťte se na svého sluchadlového odborníka.



Před sprchováním, plaváním nebo použitím fénu na vlasy sluchadla vyjměte z uší.



Nenoste sluchadla během aplikace parfému, spreje, gelů, pleťové vody nebo krému.



Nesušte sluchadlo v mikrovlnné troubě – zničilo by se.



Nikdy nepoužívejte sluchadla jiných osob a nikdy nedovolte, aby ony používaly vaše, mohlo by dojít k poškození sluchu.



Nikdy nepoužívejte sluchadla v prostředí, kde mohou být přítomny výbušné plyny, např. v dolech apod.



Uchovávejte sluchadla, jejich součásti, doplňky a baterie mimo dosah dětí a mentálně postižených osob.



Nikdy se nesnažte sluchadlo rozebírat nebo opravovat sami. Potřebujete-li své sluchadlo opravit, obraťte se na sluchadlového odborníka.



Vaše sluchadla obsahují radiokomunikační technologii. Vždy si prohlédněte prostředí, ve kterém je používáte. Pokud platí nějaká omezení, učiňte vhodná bezpečnostní opatření.



Vaše zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo mezinárodním normám pro elektromagnetickou kompatibilitu. Nelze však vyloučit, že bude způsobovat rušení jiných elektrických zařízení. Pokud rušení vznikne, udržujte od jiných elektrických zařízení patřičný odstup.



Sluchadlo je velmi silné a může vydávat zvuky, které překračují hladinu 132 dB. Hrozí riziko poškození zbývajících sluchu.



Nevystavujte sluchadla extrémním teplotám ani vysoké vlhkosti. Pokud zvlhnou nebo se hodně zpotíte, rychle je vysušte.



Mějte prosím na paměti, že hlasitější zvuk odesílaný do vašeho sluchadla může přehlušit další důležité zvuky, jako jsou například alarmy nebo dopravní hluk. V takových situacích je nutné nastavit hlasitost zvuku odesílaného do vašich sluchadel na vhodnou úroveň.

Sluchadla je nutné skladovat a přepravovat při teplotách v rozmezí -20 °C až +55 °C (-4 °F až 131 °F) a relativní vlhkosti 10 % – 95 %.

Sluchadla byla navržena pro použití při teplotách od 0 °C (32 °F) do 50 °C (122 °F), při relativní vlhkosti 10 % – 95 % a tlaku 750 až 1060 mbar.

Technické specifikace a další informace o sluchadlech naleznete na adrese <https://global.widex.com>.

SLUCHADLO

Indikace pro použití

Sluchadla jsou určena pro jedince se ztrátou sluchu v rozsahu závažnosti od minimální (10 dB HL) po těžkou až velmi hlubokou (100 dB HL) a v konfiguracích pro úplnou ztrátu sluchu.

Jsou naprogramována kvalifikovanými odborníky na léčbu sluchu (audiology, odborníky na sluchadla, otorinolaryngology), kteří jsou vyškoleni v léčbě sluchu.

Zamýšlené použití

Sluchadla jsou určena jako zařízení zesilující vedení zvuku vzduchem a používají se ke každodennímu poslechu v běžném prostředí. Sluchadla mohou být vybavena programem Zen, který poskytuje relaxační zvukový podklad (tj. zdroj hudby nebo šumu) pro dospělé osoby, které si přejí tento zvuk poslouchat v tichém prostředí.

Baterie

Pro vaše sluchadlo použijte baterii **zinek-vzduch typ 312**.

Vždy použijte novou baterii, kterou vám doporučil odborník.

POZNÁMKA

Před vložením baterie do sluchadla zkontrolujte, zda je zcela čistá a nejsou na ní žádné nečistoty. Jinak sluchadlo nemusí fungovat dle očekávání.



Nikdy se nesnažte nabíjet baterii typu zinek-vzduch, protože by mohla explodovat.



Při skladování sluchadel v nich nikdy nenechávejte vybité baterie. Mohly by vytéct a sluchadlo zničit.



Použité baterie zlikvidujte podle pokynů uvedených na obalu a poznačte si datum expirace.

Signalizace slabé baterie


Když je baterie vybitá, ozve se zvukový signál. Pokud však dojde k náhlému vybití baterie, nemusí upozornění zaznít. Doporučujeme při sobě nosit vždy náhradní baterii.

Výměna baterie

Při výměně baterií postupujte následovně:



Sejměte z nové baterie lepicí štítek a ujistěte se, že na ní nezůstal zbytek lepidla. Nechejte ji po dobu 60 sekund „dýchat“.

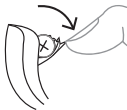

Pomocí výstupku pro nehet jemně otevřete dvířka baterie a vyjměte starou baterii.



Nyní podle obrázku vložte do přihrádky novou baterii. Zavřete přihrádku. Pokud ji nelze snadno zavřít, není baterie umístěna správně. Pokud sluchadlo několik dnů nepoužíváte, baterii vyjměte.

POZNÁMKA

Dávejte pozor, abyste sluchadlo neupustili na zem – vždy jej při výměně baterie držte nad měkkým povrchem.

Bateriové pouzdro s pojistkou proti otevření

Pokud bude sluchadlo používat dítě nebo mentálně postižená osoba, můžete požádat odborníka na sluch aby mu jej vydal opatřené bateriovým pouzdem s pojistkou proti otevření.



Otevřít ji budete moci pomocí speciálního nástroje, který obdržíte (viz obrázek).

Zvukové signály

Vaše sluchadlo vydává zvuky, aby vás informovalo o aktivování určitých funkcí nebo o tom, že jste změnili program. Tyto zvuky mohou být ve formě mluvených zpráv nebo tónů v závislosti na vašich potřebách a preferencích.

| | |
|------------------|--|
| Program 1 | Zpráva / jedno krátké pípnutí |
| Program 2 | Zpráva / dvě krátká pípnutí |
| Program 3 | Zpráva / tři krátká pípnutí |
| Program 4 | Zpráva / jedno krátké a jedno dlouhé pípnutí |
| Program 5 | Zpráva / jedno dlouhé a dvě krátká pípnutí |
| Zen+ | Zpráva / tón |

Pokud tyto zvukové signály nepotřebujete, požádejte svého sluchadlového odborníka, aby je vypnul.

Ztráta komunikace s druhým sluchadlem


(Dostupné pouze u vybraných modelů)

Odborník na sluchadla může na vašem sluchadle zapnout funkci, která vás varuje pokaždé, když dojde ke ztrátě kontaktu se sluchadlem na druhém uchu. Ve svém uchu uslyšíte mluvenou zprávu.

Jak rozpoznat pravé od levého

Sluchadlo pro pravé ucho má červenou značku. Sluchadlo pro levé ucho má modrou značku.

Vypínání a zapínání sluchadla

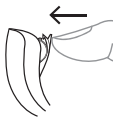

Chcete-li sluchadlo zapnout, zavřete kryt baterie. Pokud odborník na sluchadla tuto funkci nedeaktivoval, vydá sluchadlo zvukový signál značící jeho zapnutí.



Chcete-li sluchadlo vypnout, stlačte kryt baterie směrem dolů.

POZNÁMKA

Pokud sluchadlo nepoužíváte, nezapomeňte je vypnout.

Nasazení a vyjmutí sluchadla


Nasazení sluchadla



1. Přidržte spodní část hadičky a vložte ušní sadu do ucha. Můžete si pomoci tak, že zároveň zataháte za ušní boltec nahoru a dolů.
2. Umístěte sluchadlo za ucho. Sluchadlo by mělo pohodlně spočívat na uchu a těsně přiléhat k hlavě.

Sluchadlo lze spojit s řadou různých typů ušních sad. Další informace o vaší ušní sadě naleznete v příslušné příručce.

Sejmutí sluchadla

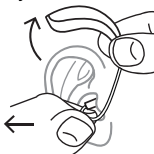

Nejprve sluchadlo sejměte zpoza ucha. Přidržte spodní část hadičky a opatrně vytáhněte ušní sadu ze zvukovodu.

Nastavení zvuku a programu

Pokud máte dvě sluchadla, lze tlačítko naprogramovat několika způsoby:

Jako speciální tlačítko pro změnu programu:

Chcete-li změnit program, stačí poklepat na tlačítko. Chcete-li vstoupit do programů SmartToggle nebo z nich vystoupit, tlačítko stiskněte a podržte déle než jednu vteřinu (toto nastavení je volitelné). Jakmile jste vstoupili do programu SmartToggle, můžete krátkými klepnutími měnit různé styly Zen.

Jako speciální tlačítko pro nastavení zvuku:

Pro zvýšení slyšitelnosti a hlasitosti stiskněte tlačítko na svém pravém sluchadle. Pokud potřebujete snížit hlasitost nebo chcete větší pohodlí, klepněte na tlačítko na levém sluchadle.

Dlouhým stisknutím jednoho z vašich sluchadel ztlumíte a znovu vrátíte zvuk (toto nastavení je volitelné).

Jako kombinované tlačítko pro změnu programu a úpravy hlasitosti:

Máte-li vybranou tuto možnost, stiskněte tlačítko na pravém sluchadle pro lepší slyšitelnost a vyšší hlasitost. Pokud potřebujete snížit hlasitost nebo chcete větší pohodlí, pouze klepněte na tlačítko na levém sluchadle. Dlouhým stisknutím některého ze sluchadel změníte program.

Pokud máte jen jedno sluchadlo, krátkým stisknutím změníte program a dlouhým stisknutím získáte přístup k programům SmartToggle.

Programy

| PROGRAMY | POUŽITÍ |
|-----------------|---|
| Univerzální | Pro každodenní použití |
| Ticho | Speciální program pro poslouchání v tichých prostředích |
| Automobil | Pro poslouchání v prostředí, kde je hluchná doprava – auta, vlaky apod. |
| Město | Pro poslech v prostředích s měnící se hladinou hlasitosti (v supermarketech, hlučném pracovním prostředí apod.) |
| Restaurace | Pro poslech v situacích, kdy mnoho osob mluví současně |
| Hudba | Pro poslech hudby |

PROGRAMY**POUŽITÍ**

| | |
|---|---|
| T | S tímto programem posloucháte přes telefonní cívku sluchadla, což umožňuje poslouchat zvuk přímo bez ruchu na pozadí (vyžaduje systém telefonní smyčky) |
|---|---|

| | |
|-----|---|
| M+T | Tento program je kombinací mikrofonu sluchadla a telefonní cívky. Posloucháte zdroj zvuku, ale rovněž slyšíte další zvuky |
|-----|---|

SPECIÁLNÍ PROGRAMY**POUŽITÍ**

| | |
|-----|---|
| Zen | Přehrává tóny nebo ruch jako relaxační zvuk na pozadí |
|-----|---|

| | |
|---------|---|
| Telefon | Tento program je vytvořen k poslechu telefonních hovorů |
|---------|---|

PROGRAMY SMART-TOGGLE**POUŽITÍ**

| | |
|------|---|
| Zen+ | Tento program je podobný jako Zen, ale umožňuje poslouchat různé typy tónů nebo ruchu |
|------|---|

| | |
|--------|--|
| Phone+ | Tento program vás nechá poslouchat telefon a zabrání poslechu okolních zvuků. Jedno z vašich sluchadel přenáší telefonní hovor do druhého, takže můžete poslouchat oběma ušima |
|--------|--|

POZNÁMKA

Názvy v seznamu programů jsou výchozími názvy. Sluchadlový odborník může rovněž vybrat alternativní název programu z předvybraného seznamu. Pro ještě jednodušší výběr správného programu pro poslech v každé situaci.

POZNÁMKA

Na sluchadle můžete mít pouze jeden program s chytrým přepínáním (Smart-Toggle).

Podle míry vaší ztráty sluchu může sluchadlový odborník aktivovat funkci rozšířené slyšitelnosti. Zeptejte se svého odborníka na sluch, zda by to pro vás mohlo být přínosné.

Pokud se vaše potřeby a preference v průběhu času změní, může odborník jednoduše váš výběr programu změnit.

Program Zen

Vaše sluchadlo může být vybaveno jedinečným volitelným poslechovým programem, který se nazývá Zen. Vytváří melodie (a někdy šum) na pozadí.



Budete-li mít pocit, že se snížila hlasitost nebo se zhoršila tolerance zvuků, řeč není dost jasná nebo se zhoršil ušní šelest (tinnitus), obraťte se na svého lékaře.



Program Zen může bránit ve slyšení každodenních zvuků včetně řeči. Neměli byste jej používat, když potřebujete takové zvuky slyšet. V těchto situacích přepněte sluchadlo na jiný program než Zen.

Používání telefonu se sluchadly




Při použití telefonu jej držte u hlavy šikmo nad uchem, nikoli přímo vedle ucha.

ČIŠTĚNÍ

Nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:

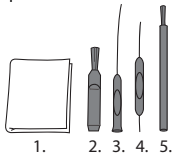

1. Hadřík
2. Kartáček
3. Dlouhý nástroj pro odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj pro odstraňování ušního mazu
5. Magnet baterie

Čištění sluchadla

Budete-li své sluchadlo čistit každý den, bude fungovat efektivněji a jeho nošení bude příjemnější.



Otřete sluchadlo měkkým hadříkem (např. hadříkem, který jste dostali od odborníka).
Pokud jsou otvory mikrofonu ucpané, obraťte se na odborníka.

Pokud sluchadlo zvlhne nebo se hodně zpotíte, ihned jej vysušte. Někteří lidé používají speciální vysoušeč Widex PerfectDry Lux, aby jim pomáhal udržet jejich sluchadla suchá a čistá. Zeptejte se odborníka, zda by to pro vás bylo vhodné.

Nechejte přihrádku na baterii otevřenou, aby se sluchadlo vyvětralo. Informace o čištění ušní sady naleznete v příručce k ušní sadě.



Na čištění sluchadla nepoužívejte žádnou tekutinu ani dezinfekci.



Každý den sluchadlo po použití očistěte a zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud se sluchadlo během nošení rozbije a ve zvukovodu vám zůstanou malé úlomky, obraťte se na svého lékaře. Nikdy se nepokoušejte tyto úlomky vyjmout sami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke sluchadlu můžete používat nejrůznější příslušenství. Abyste zjistili, zda by pro vás bylo toto příslušenství užitečné, zeptejte se odborníka na sluch.

| Název | Použit |
|--------------------|---|
| RC-DEX | dálkový ovladač |
| TV-DEX | pro poslech TV a audio |
| PHONE-DEX 2 | pro snadné použití pevné telefonní linky |
| FM+DEX | pro příjem audio a FM signálů |
| T-DEX | pro připojení sluchadel k mobilním telefonům pomocí telefonní cívky |
| UNI-DEX | pro připojení sluchadel k mobilním telefonům |
| CALL-DEX | pro snadné bezdrátové připojení k mobilním telefonům |
| COM-DEX | pro bezdrátové připojení k mobilním telefonům a jiným zařízením prostřednictvím Bluetooth |
| COM-DEX Remote Mic | ulehčuje uživatelům sluchadel rozeznávat řeč v obtížných poslechových situacích |

Dostupné pouze v některých zemích.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tyto stránky obsahují rady, jak řešit situace, když sluchadlo přestane fungovat nebo nefunguje dle očekávání. Pokud problém přetrvává, obraťte se na odborníka na sluch.

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|-----------------------------------|--|--|
| Sluchadlo nereaguje. | Není zapnuté. | Ujistěte se, že je přihrádka na baterie zcela uzavřena |
| | Baterie nefunguje | Vložte novou baterii |
| Sluchadlo není dostatečně hlasité | Ucho je ucpané ušním mazem | Obraťte se na svého lékaře |
| | Mohlo dojít ke změně sluchu | Obraťte se na odborníka na sluch / svého lékaře. |
| Sluchadlo nepřetržitě píská | Ucho je ucpané ušním mazem | Obraťte se na svého lékaře |
| Sluchadla nepracují synchronně | Došlo ke ztrátě spojení mezi sluchadly | Vypněte je a znovu zapněte |

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|---|--|
| Sluchadla nereagují na ovládací zařízení odpovídající změnou hlasitosti nebo programu | <ul style="list-style-type: none"> a. Zařízení je používáno mimo přenosový rozsah b. Silné elektromagnetické rušení v blízkém okolí c. Zařízení a sluchadla nejsou spárovány | <ul style="list-style-type: none"> a. Posuňte zařízení blíže ke sluchadlům b. Přesuňte se dále od známého zdroje EM rušení c. Ujistěte se u svého odborníka na sluch, že je zařízení kompatibilní se sluchadly. |
| Ze sluchadel slyšíte „přerušovanou“ řeč (zapnuto a vypnuto) nebo žádnou řeč (ztlumenou) z přenášejícího sluchadla | <ul style="list-style-type: none"> a. V jednom ze sluchadel vypršelo datum expirace baterie b. Silné elektromagnetické rušení v blízkém okolí | <ul style="list-style-type: none"> a. Vyměňte baterii v jednom nebo obou sluchadlech b. Přesuňte se dál od zdrojů rušení |

POZNÁMKA

Tyto informace se vztahují pouze ke sluchadlu Viz „Ušní sady pro sluchadla Widex“ uživatelská příručka pro informace k ušní sadě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého ušního lékaře.

PRÁVNÍ INFORMACE

Směrnice ES

Směrnice 2014/53/EU

Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že výrobek U-FS je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Model U-FS obsahuje rádiový vysílač pracující na kmitočtu 10,6 MHz, – 54 dB μ A/m na vzdálenost 10 m.

Kopie dokumentu „Prohlášení o shodě“ podle ustanovení směrnice 2014/53/EU je dostupná na adrese:

<http://global.widex.com/doc>



N26346

Informace týkající se likvidace

Sluchadla, jejich příslušenství a baterie se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu.

Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel je nutné odevzdat na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vrátit odborníkovi na sluchadla za účelem bezpečné likvidace.

Prohlášení k nařízení FCC a IC

FCC ID: TTY-UFS

IC: 5676B-UFS

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SYMBOLY

Symbole běžně užívané společností Widex A/S při označování zdravotnických prostředků (štítky/návody/atd.)

Symbol Název/Popis



Výrobce

Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.



Katalogové číslo

Katalogové číslo (číslo položky) produktu.



Přečtěte si návod k použití

Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování / bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.



Varování

Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudovat.



Značka WEEE

„Nevyhadzovat do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.



Značka CE

Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.

Symbol **Název/Popis**



Značka RCM

Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.

Widex PRAHA

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz

Widex OSTRAVA

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

**WIDEX A/S**

Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngbe, Dánsko

<https://global.widex.com>

0123

Návod č.:

9 514 0317 020 05

Vydáno:

2020-05

