

# WIDEX **MOMENT™**

## INSTRUCCIONES DE USO

### **LA WIDEX MOMENT™ FAMILIA**

Modelo MRB2D  
RIC/RITE  
(Auricular en el canal/Auricular en el oído)



**WIDEX®**  
HIGH DEFINITION HEARING

# SU AUDÍFONO

*(Esta página debe rellenarla el audioprotesista)*

Esta es una lista de posibles programas para su audífono. Para obtener más información sobre el uso de estos programas, consulte “Personalización”.

## Los programas de su audífono:

| <b>PROGRAMAS</b>                    | <b>EXTENSOR DE AUDIBILIDAD</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Universal  | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> PureSound  | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Silencio   | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Confort    | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Transporte | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Urbano     | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Impacto    | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Fiesta     | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Social     | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> Música     | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> T          | <input type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/> M+T        | <input type="checkbox"/>       |

**PROGRAMAS ESPECIALES** Zen Teléfono**EXTENSOR DE AUDIBILIDAD****PROGRAMAS SMARTTOGGLE** Zen+**EXTENSOR DE AUDIBILIDAD**

Los nombres de los programas indicados en la tabla son los nombres predefinidos. Si elige utilizar otros nombres disponibles, apúntelos en la tabla. De esta forma, siempre sabrá qué programas tiene en sus audífonos.

**NOTA**

La descripción y las instrucciones de uso del programa Teléfono que se incluyen en este manual se refieren solo a conversaciones telefónicas normales, no a conversaciones telefónicas con transmisión directa desde su smartphone.

**Lea las instrucciones**

Lea detenidamente este manual y el folleto “Conjuntos adaptadores para audífonos Widex” antes de comenzar a usar su audífono.

**Transmisión de sonido y control inalámbrico**

Este audífono es compatible con la transmisión de sonido y el control inalámbrico directo desde smartphones y otros dispositivos a través de DEX. Para obtener más ayuda e información, póngase en contacto con su audioprotesista o visite: <https://global.widex.com/MOMENT>.

Este audífono funciona de manera inalámbrica con la aplicación MOMENT.  
No asumimos responsabilidad alguna si el audífono se utiliza con cualquier  
aplicación de terceros o si la aplicación MOMENT se utiliza con un dispositivo  
diferente.

# ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>SU AUDÍFONO.....</b>                         | <b>9</b>  |
| Bienvenido.....                                 | 9         |
| Características principales de su audífono..... | 9         |
| <b>CONDICIONES DE USO.....</b>                  | <b>11</b> |
| Indicaciones de uso.....                        | 11        |
| Uso previsto.....                               | 11        |
| Condiciones de funcionamiento.....              | 11        |
| Condiciones de almacenamiento y transporte..... | 12        |
| <b>USO DIARIO.....</b>                          | <b>13</b> |
| Cómo encender y apagar el audífono.....         | 13        |
| Cómo ponerse y quitarse el audífono.....        | 13        |
| <b>BATERÍA.....</b>                             | <b>15</b> |
| Batería de zinc-aire.....                       | 15        |
| Indicación de que se está agotando la pila..... | 15        |
| Cómo cambiar la pila.....                       | 15        |
| Compartimento de batería de seguridad.....      | 17        |
| <b>PERSONALIZACIÓN.....</b>                     | <b>18</b> |
| Programas.....                                  | 18        |
| Programa Zen.....                               | 20        |

|  |           |
|--|-----------|
| Señales de sonidos.....                                  | 21        |
| Audífono opuesto perdido.....                            | 21        |
| Ajuste de sonido y programa.....                         | 21        |
| Cómo usar un smartphone con sus audífonos.....           | 22        |
| <b>CÓMO EMPAREJAR SU AUDÍFONO CON SU SMARTPHONE.....</b> | <b>23</b> |
| Compatibilidad con smartphones.....                      | 23        |
| <b>LIMPIEZA.....</b>                                     | <b>24</b> |
| Herramientas.....  | 24        |
| Cómo limpiar su audífono.....                            | 24        |
| <b>ACCESORIOS.....</b>                                   | <b>26</b> |
| <b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>                      | <b>27</b> |
| <b>INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.....</b>                    | <b>29</b> |
| Declaraciones de conformidad de FCC e ISED.....          | 29        |
| Directivas de la Unión Europea.....                      | 31        |
| Directiva 2014/53/UE.....                                | 31        |
| Información sobre cómo desechar el dispositivo.....      | 32        |
| <b>SÍMBOLOS.....</b>                                     | <b>33</b> |

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Lea detenidamente estas páginas antes de comenzar a usar su audífono.



**Los audífonos y las baterías pueden ser peligrosos si se tragan o utilizan de forma inadecuada. Ingerirlo o usarlo indebidamente puede causar lesiones graves o incluso la muerte. En caso de ingestión, llame inmediatamente al número de emergencias o al hospital más cercano.**



Quítese los audífonos cuando no los esté usando. Así se podrá ventilar el conducto auditivo y prevenir infecciones de oído.



Póngase en contacto de inmediato con su médico o audioprotesista si sospecha que puede tener una infección de oído o una reacción alérgica.



Póngase en contacto con su audioprotesista si el audífono le resulta incómodo, no se ajusta bien o le causa irritación, enrojecimiento o alguna molestia similar.



Quítese los audífonos antes de ducharse, nadar o usar un secador de pelo.



No se aplique perfumes, aerosoles, geles, lociones ni cremas con los audífonos puestos.



No seque su audífono en un microondas; lo estropearía.



Nunca utilice los audífonos de otras personas ni deje a otros usar los suyos, ya que podría dañar su audición.



No utilice nunca los audífonos en sitios donde pueda haber gases explosivos, como en minas o lugares similares.



**Mantenga los audífonos, junto con sus partes, accesorios y baterías, fuera del alcance de los niños y de personas con discapacidad mental.**



Nunca intente abrir o reparar el audífono usted mismo. Póngase en contacto con su audioprotesista cuando sea necesario reparar el audífono.



Sus audífonos tienen integrada una tecnología de comunicación de radio. Tenga siempre en cuenta el entorno donde los está utilizando. Donde exista alguna restricción pertinente, deberá tomar las precauciones debidas para cumplirla.



Su dispositivo ha sido diseñado para cumplir con los estándares internacionales de compatibilidad electromagnética. Sin embargo, no se puede descartar que pueda causar interferencias con otros equipos eléctricos. Si experimenta interferencias, mantenga una distancia entre los audífonos y otros equipos eléctricos.



**Tenga en cuenta que transmitir sonido a sus audífonos con un volumen muy alto puede impedirle oír otros sonidos importantes, como alarmas y el ruido del tráfico. En estas situaciones, asegúrese de mantener el volumen del sonido transmitido a un nivel adecuado.**



**Su audífono es muy potente y puede reproducir sonidos superiores a los 132 dB. Por lo tanto, puede haber un riesgo de dañar la audición que usted conserva.**



No exponga sus audífonos a temperaturas extremas ni a mucha humedad, y séquelos rápidamente si se mojan o si usted transpira mucho.



Hay riesgo de explosión si reemplaza la batería por un tipo incorrecto.



# SU AUDÍFONO

## Bienvenido

Felicitaciones por su nuevo audífono.

Utilice su audífono con regularidad, aunque al principio le cueste acostumbrarse a llevarlo. Si no lo utiliza con frecuencia, no podrá aprovecharlo al máximo.

Su audífono y los accesorios pueden ser distintos a los que se muestran en estas instrucciones. Además, nos reservamos el derecho de hacer los cambios que consideremos necesarios.

## Características principales de su audífono

Su audífono se muestra a continuación con el conjunto adaptador. El conjunto adaptador consiste en un cable auditivo con auricular y un adaptador, y es la parte del audífono que lleva dentro del oído. Si desea obtener más información sobre el conjunto adaptador, consulte el manual de este.



1. Botón pulsador
2. Pestaña de agarre
3. Cable auditivo con auricular



- 4. Compartimiento de la batería
- 5. Identificación izquierda/derecha

El color de la identificación izquierda/derecha le indica cómo reconocer cada lado. El audífono izquierdo tiene una marca azul. El audífono derecho tiene una marca roja.

# CONDICIONES DE USO

## Indicaciones de uso

Estos audífonos son indicados para personas con pérdida auditiva de mínima (10 dB HL) a severa a profunda (100 dB HL) y todas las configuraciones de pérdida auditiva.

Los dispositivos deben ser programados por profesionales de la audición (audioprotesistas, especialistas de la audición y otorrinolaringólogos) especializados en la (re)habilitación auditiva.

## Uso previsto

Los audífonos están pensados como dispositivos de amplificación de conducción aérea para su uso en entornos de escucha cotidianos. Los audífonos pueden estar equipados con el programa Zen. El objetivo del programa Zen es proporcionar un fondo sonoro relajante (es decir, una fuente de música/ruido) para adultos que deseen escuchar sonidos de este tipo en ambientes silenciosos.

## Condiciones de funcionamiento

Se ha diseñado el audífono para funcionar en situaciones cotidianas. Funciona en condiciones ambientales en las que se sienta cómodo. Puede usarlo durante un vuelo, pero debe quitárselo para ducharse o nadar.

A continuación se enumeran las condiciones de funcionamiento específicas de su audífono:

|                     | <b>Mínima</b> | <b>Máxima</b>  |
|---------------------|---------------|----------------|
| Temperatura         | 0 °C (32 °F)  | 50 °C (122 °F) |
| Humedad             | 10 % de HR    | 95 % de HR     |
| Presión atmosférica | 750 mbar      | 1060 mbar      |

### **Condiciones de almacenamiento y transporte**


El audífono es sensible a condiciones extremas, como temperatura alta. Consulte a continuación las condiciones específicas de almacenamiento y transporte:

|             | <b>Mínima</b>  | <b>Máxima</b>  |
|-------------|----------------|----------------|
| Temperatura | -20 °C (-4 °F) | 55 °C (131 °F) |
| Humedad     | 10 % de HR     | 95% HR         |

Puede encontrar las fichas técnicas e información adicional sobre los audífonos en <https://global.widex.com>.

## USO DIARIO

### Cómo encender y apagar el audífono

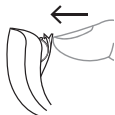

Para encender el audífono, cierre el compartimento de la pila. El audífono emitirá una señal sonora para indicar que está encendido, a no ser que el audioprotesista haya desactivado esta función.



Para apagar el audífono, abra el compartimento de pila hacia abajo.

#### NOTA

No olvide apagar el audífono cuando no lo use.

### Cómo ponerse y quitarse el audífono


#### Cómo colocarse el audífono



1. Introduzca el adaptador de oído en la oreja mientras sujeta la parte inferior del tubo/cable auditivo. Puede que le ayude si lleva la oreja hacia arriba y atrás.
2. A continuación, colóquese el audífono detrás de la oreja. El audífono debe quedar cómodamente colocado en la oreja, cerca de la cabeza.

El audífono puede incluir diferentes tipos de adaptadores de oído. Para más información sobre su adaptador, consulte el manual específico de adaptadores de oído.

### **Cómo quitarse el audífono**

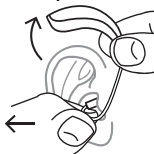

Comience quitándose el audífono de detrás de la oreja.

A continuación, saque con cuidado el conjunto adaptador del canal auditivo mientras sujeta la parte inferior del tubo/cable auditivo.

# BATERÍA

## Batería de zinc-aire

Utilice **una pila de cinc-aire del tipo 312** para su audífono.

Utilice siempre una pila nueva del tipo recomendado por su audioprotesista.

### NOTA

Compruebe que la pila está completamente limpia y libre de residuos antes de introducirla en el audífono. De no ser así, el audífono puede no funcionar bien.



No intente nunca recargar una pila de cinc-aire, ya que pueden explotar.



No deje nunca una pila agotada en el audífono. Ésta podría tener fugas y dañar su audífono.



Deshágase de las pilas agotadas según lo indicado en el embalaje y tenga en cuenta la fecha de caducidad.

### Indicación de que se está agotando la pila

Cuando la pila está agotada, el audífono emite una señal sonora. No obstante, puede no escuchar un aviso de pila agotada si la pila se agota repentinamente. Recomendamos tener siempre pilas adicionales a mano.

### Cómo cambiar la pila

Haga lo siguiente:



Retire la etiqueta adhesiva de la pila nueva y compruebe que no quedan restos de pegamento en la pila. Permita que la pila se ventile durante 60 segundos.

Utilice el uñero para abrir con cuidado el compartimento de pila y retirar la pila agotada.

Después, coloque la pila en el compartimento como se muestra en la ilustración. Cierre el compartimento de pila. Si no es fácil cerrar el compartimento de pila, ésta no está bien colocada.

Si no va a utilizar el audífono durante varios días, saque la pila.

#### **NOTA**

Evite que se le caiga el audífono al suelo. Cambie siempre la pila encima de una superficie blanda.



## Compartimento de batería de seguridad

Si el audífono va a ser utilizado por un niño o una persona con discapacidad mental, puede pedir a su profesional de la audición un compartimento de batería de seguridad.



Para abrir el compartimento de la batería, utilice la herramienta especial suministrada y siga la imagen.

# PERSONALIZACIÓN

## Programas

Esta es una descripción general de los programas que puede seleccionar. Para obtener más información, consulte a su audioprotesista.

| <b>PROGRAMAS</b> | <b>USO</b>  |
|------------------|---|
| Universal        | Programa automático enfocado a brindar un sonido óptimo en todas las situaciones                                      |
| PureSound        | Programa automático enfocado a brindar un sonido natural y agradable en todas las situaciones                         |
| Silencio         | Programa especial para escucha en entornos silenciosos  |
| Comodidad        | Programa especial para escuchar en entornos ruidosos  |
| Transportes      | Para escucha en situaciones con ruido de coches, trenes, etc.   |
| Impacto          | Use este programa si prefiere un sonido claro y agudo   |
| Urbano           | Para escucha en situaciones con niveles de sonido cambiantes (supermercados, puestos de trabajo ruidosos o similares) |

| <b>PROGRAMAS</b>            | <b>USO</b>   |
|-----------------------------|--|
| Fiesta                      | Para escucha en situaciones en las que muchas personas hablan al mismo tiempo  |
| Social                      | Use este programa cuando se encuentre en reuniones sociales pequeñas, por ejemplo en comidas familiares  |
| Música                      | Para oír música  |
| T                           | Con este programa, usted oye mediante la telebobina del audífono, que le permite oír directamente el sonido sin ruido de fondo (requiere un sistema de bucle magnético). |
| M+T                         | Este programa combina el micrófono del audífono y la telebobina. Le permite oír la fuente sonora, pero también oír otros sonidos.  |
| <b>PROGRAMAS ESPECIALES</b> | <b>USO</b>   |
| Zen                         | Reproduce tonos o sonidos para crear un fondo sonoro relajante.  |
| Teléfono                    | Programa diseñado para oír conversaciones telefónicas  |

## PROGRAMAS SMARTTOG- GLE

### USO

---

|      |  |
|------|--|
| Zen+ | Se trata de un programa similar a Zen que le permite escuchar diferentes tipos de tonos o sonidos. |
|------|--|

---

Los nombres indicados en la lista de programas son los predeterminados. Su audioprotesista también puede elegir un nombre de programa alternativo de una lista preseleccionada. Así, le resultará incluso más sencillo elegir el programa adecuado en cada situación de escucha.

Dependiendo de su pérdida auditiva, el profesional de la audición puede activar la función Extensor de audibilidad. Pregunte a su audioprotesista si es posible para usted beneficiarse de esta función.

Si sus necesidades y preferencias cambian al cabo de un tiempo, su profesional de la audición puede cambiar fácilmente su selección de programas.

### Programa Zen

Su audífono puede contar con un programa de escucha opcional único denominado Zen. Zen reproduce tonos musicales (o un sonido zumbante) de fondo.



Si percibe una reducción de la intensidad, su tolerancia hacia los sonidos, si el habla es menos clara o si el tinnitus empeora, póngase en contacto con el audioprotesista.



El uso del programa Zen puede afectar a la audición de los sonidos que le rodean, incluida el habla. No debe utilizarlo cuando sea importante poder escuchar estos sonidos. En situaciones de este tipo, seleccione un programa que no sea Zen.

## Señales de sonidos

Su audifono emite sonidos para informarle de que se han activado ciertas funciones o de que ha cambiado de programa. Estos sonidos pueden ser mensajes de voz o tonos.

Pida a su audioprotesista que desactive estos sonidos si no los necesita.

### **Audifono opuesto perdido**

(\*Sólo en modelos seleccionados)

Su audioprotesista puede activar una función que le avisa si uno de los audífonos pierde el contacto con el otro. Oirá un mensaje.

## Ajuste de sonido y programa

Si usted tiene dos audífonos, es posible programar el botón pulsador de varias maneras.

### **Como botón exclusivo para los programas:**

Para cambiar de programa solo tiene que presionar el botón. Para acceder a los programas SmartToggle o salir de ellos, pulse y mantenga presionado el pulsador más de un segundo (esta configuración es opcional). Una vez que haya accedido al programa SmartToggle, puede alternar entre los diferentes estilos Zen que usted haya seleccionado con pulsaciones breves del botón.

### **Como botón exclusivo para los ajustes de sonido:**

Presione el botón de un audifono si desea tener mayor audibilidad y subir el volumen. Si desea bajar el volumen u oír con mayor comodidad, presione el botón del otro audifono.

Consulte con su audioprotesista para ver en qué audífono debe subir el volumen y en qué audífono debe bajar el volumen.

Una pulsación prolongada (más de un segundo) en cualquiera de los audífonos silenciará el sonido. Para activar de nuevo el sonido, presione brevemente el pulsador de su audífono derecho (esta configuración es opcional).

### **Como botón de ajuste de sonido y programa combinado:**

Si cuenta con esta opción, presione el botón de su audífono derecho si desea tener mayor audibilidad y aumentar el volumen. Si necesita bajar el volumen o escuchar con mayor comodidad, simplemente presione el botón de su audífono izquierdo. Una pulsación prolongada en cualquiera de los audífonos cambiará de programa.

Si solo tiene un audífono, una pulsación breve cambiará de programa y una pulsación prolongada le permitirá acceder a los programas SmartToggle.

## **Cómo usar un smartphone con sus audífonos**



Cuando utilice un smartphone, sosténgalo frente a usted de modo tal que el micrófono del teléfono esté cerca de la boca. De esta manera, usted experimentará el mejor sonido durante su llamada telefónica.

# CÓMO EMPAREJAR SU AUDÍFONO CON SU SMARTPHONE

Para emparejar sus audífonos con su smartphone, debe iniciar los audífonos. Haga lo siguiente:

1. Reinicie los audífonos abriendo y cerrando el compartimento de pila.
2. Mantenga los audífonos cerca de su teléfono y siga las instrucciones en la pantalla del teléfono.
3. Ahora, los audífonos y su smartphone están listos para su uso.

## **NOTA**

Los audífonos solo permanecen en el modo de emparejamiento durante tres minutos después de haberlos reiniciado. Si no los empareja a tiempo, puede ser necesario volver a reiniciarlos.

## **Compatibilidad con smartphones**


Puede ver una lista de dispositivos compatibles (smartphones, tabletas, etc.), en este sitio web:

<https://global.widex.com>.

# LIMPIEZA

## Herramientas

Recibirá las siguientes herramientas con su audífono:

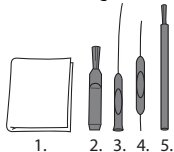

1. Paño
2. Cepillo
3. Herramienta anticerumen larga
4. Herramienta anticerumen corta
5. Imán para la pila

## Cómo limpiar su audífono

La limpieza diaria del audífono hará que funcione de manera más eficaz y que su uso sea más cómodo.



Limpie el audífono con un paño suave (por ejemplo, el que le haya dado su profesional de la audición). Si las aberturas del micrófono están obstruidas, comuníquese con su profesional de la audición.

Seque el audífono rápidamente si se moja o si usted transpira mucho. Algunas personas usan un deshumidificador especial, como el Widex PerfectDry Lux, para mantener sus audífonos limpios y secos. Pregunte a su profesional de la audición si esta opción es adecuada para usted.



Cuando no lo esté utilizando, deje abierto el compartimento de la pila para ventilar el audífono. Para obtener información sobre cómo limpiar el adaptador, consulte el manual del adaptador de oído.



No utilice ningún tipo de líquido o desinfectante para limpiar el audífono.



Después de usarlo, limpie y revise el audífono todos los días para comprobar que no esté roto. Si el audífono se rompe mientras lo lleva puesto y quedan fragmentos pequeños en el conducto auditivo, comuníquese con su médico. Nunca intente sacar los fragmentos usted mismo.

## ACCESORIOS

Puede utilizar diversos accesorios con su audífono. Pregunte a su audioprotesista y averigüe si puede beneficiarse de ellos.

| <b>Nombre</b>      | <b>Uso</b>  |
|--------------------|---|
| RC-DEX             | control remoto  |
| TV-DEX             | para escuchar televisión y audio  |
| PHONE-DEX 2*       | para facilitar el uso de la telefonía fija  |
| FM + DEX           | para transmitir señales de audio y FM   |
| T-DEX              | para conectar los audífonos a teléfonos móviles a través de una bobina inductiva                          |
| COM-DEX            | para establecer una conexión inalámbrica con teléfonos móviles y otros dispositivos a través de Bluetooth |
| Remote Mic COM-DEX | para ayudar a los usuarios de audífonos a oír el habla en situaciones de escucha difíciles                |
| TV PLAY**          | para la transmisión directa de TV   |
| APLICACIÓN MO-MENT | para usar el smartphone como control de los audífonos   |

\* Disponible solo en algunos países.

\*\* Disponible con compatibilidad para WIDEX MOMENT™ hacia finales de 2020.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En estas páginas puede ver consejos sobre qué hacer si su audífono deja de funcionar, o si no funciona como es debido. Si persiste el problema, contacte con su audioprotesista

| <b>Problema</b>   | <b>Causa posible</b>                              | <b>Solución</b>  |
|---|---|--|
| No hay sonido en el audífono                            | No está encendido                                 | Asegúrese de que el compartimiento de pila está bien cerrado |
|   | La pila no funciona                               | Cambie la pila   |
| El volumen del audífono no es lo suficientemente fuerte | Su oído está bloqueado por cerumen                | Póngase en contacto con el médico                            |
|   | Su audición puede haber cambiado                  | Contacte con su audioprotesista                              |
| El audífono pita continuamente                          | Su oído está bloqueado por cerumen                | Póngase en contacto con el médico                            |
| Sus dos audífonos no están sincronizados                | Se ha perdido la conexión entre los dos audífonos | Apáguelos y vuelva a encenderlos                             |

| <b>Problema</b>  | <b>Causa posible</b>   | <b>Solución</b>   |
|--|--|---|
| El audífono no responde cuando se hacen cambios con el dispositivo de control                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. El dispositivo está fuera de su radio de transmisión</li> <li>b. Hay interferencias electromagnéticas importantes en el entorno</li> <li>c. El dispositivo y los audífonos no están alineados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Acerque el dispositivo a los audífonos</li> <li>b. Aléjese de la fuente de interferencias electromagnéticas</li> <li>c. Consulte al audioprotesista para ver si el dispositivo está alineado con los audífonos</li> </ul> |
| Oye habla interrumpida o intermitente de los audífonos, o no oye habla desde el audífono opuesto | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se ha agotado la pila de uno de los audífonos</li> <li>b. Hay interferencias electromagnéticas importantes en el entorno</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cambie las pilas de los audífonos</li> <li>b. Aléjese de la fuente de interferencias electromagnéticas</li> </ul>   |

#### **NOTA**

Esta información sólo cubre el audífono. Consulte el manual “Conjuntos adaptadores para audífonos Widex” para ver información específica sobre su adaptador de oído. Si persisten los problemas, póngase en contacto con el audioprotesista

# INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

## Declaraciones de conformidad de FCC e ISED

FCC ID: TTY-MRB2D

IC: 5676B-MRB2D

### Declaración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or tele-

vision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Windex could void the user's authority to operate the equipment.

**Declaración de ISED/Déclaration d'ISED**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

## **Directivas de la Unión Europea**

### **Directiva 2014/53/UE**

Por medio de la presente, Widex A/S declara que este MRB2D cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

El MRB2D contiene transmisores de radio que funcionan con las siguientes especificaciones: 10,6 MHz, -54 dB $\mu$ A/m a 10 m, 2,4 GHz, PIRE de 0,9 mW.

Para evitar una posible degradación del rendimiento de la radio, el dispositivo debe estar apartado al menos 25 cm (10 pulgadas) de otros equipos de radiocomunicación.

Puede consultar una copia de la declaración de conformidad según la Directiva 2014/53/UE en:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

### **Información sobre cómo desechar el dispositivo**

No deseche los audífonos, los accesorios de audífonos ni las baterías con los residuos domésticos.

Los audífonos, las baterías y los accesorios de audífonos deben desecharse en sitios aptos para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o deben entregarse a un audioprotesista para su eliminación segura.



# SÍMBOLOS

Estos son los símbolos utilizados habitualmente por Widex A/S para el etiquetado de los dispositivos médicos (etiquetas, instrucciones de uso, etc.)

## **Símbolo Denominación/Descripción**

---



### **Fabricante**

El producto pertenece al fabricante cuyo nombre y dirección aparecen junto al símbolo. Si procede, también se indica la fecha de fabricación.

---



### **Número de catálogo**

El número de catálogo (artículo) del producto.

---



### **Consulte las instrucciones de uso**

Las instrucciones de uso incluyen información preventiva importante (advertencias y precauciones) y deben leerse antes de usar el producto.

---



### **Advertencia**

Antes de usar el producto, se debe leer todo el texto marcado con un símbolo de advertencia.

---



### **Marca WEEE**

“No tire el dispositivo a la basura”. A la hora de desechar un producto, se debe enviar a un punto de recogida específico para su reciclaje y recuperación a fin de evitar el riesgo de dañar el medioambiente o la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

---

**Símbolo Denominación/Descripción**

---



**Marca CE**

El producto cumple con los requisitos establecidos en las directivas europeas de marcado CE.

---



**Marca RCM**

El producto cumple con los requisitos normativos de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y bandas de frecuencia para productos suministrados a los mercados de Australia y Nueva Zelanda.

---





**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark  
<https://global.widex.com>



**Número de manual:**  
9 514 0546 004 02  
**Fecha de emisión:**  
2020-06

