

WIDEX MOMENT™ RIC 312 D MED M-RECEIVER




WIDEX RIC 312 D er en del av WIDEX MOMENT™-familien. Bygget rundt WIDEX MOMENT™-plattformen for å levere bedre lyd via TruAcoustics™ og det revolusjonerende Widex PureSound™-paradigmet med større tilkoblingsmuligheter.

Tilpasning av RIC 312 D er enklere enn noen gang før, takket være TruAcoustics™ som gir en kraftigere personlig lyd. WIDEX RIC 312 D overvinner utfordringene ved åpen/ventilert tilpasning for lett til moderat hørselstap med Widex PureSound™-paradigmet.

- Direkte trådløs mobiltilkobling (2,4 GHz)
- Flere trådløse tilkoblinger via WidexLink-teknologi og TONELINK App
- Kompatibel med DEX hørselstekniske hjelpemidler
- 4 ytelsesnivåer: 440/330/220/110
- Bruker en M-receiver
- Bruker batteri av str. 312
- Kompatibel med TV PLAY
- Beskyttelsesklasse IP 68
- Minimalt til svært stort hørselstap

FORESLÅTT TILPASNINGSMÅLE

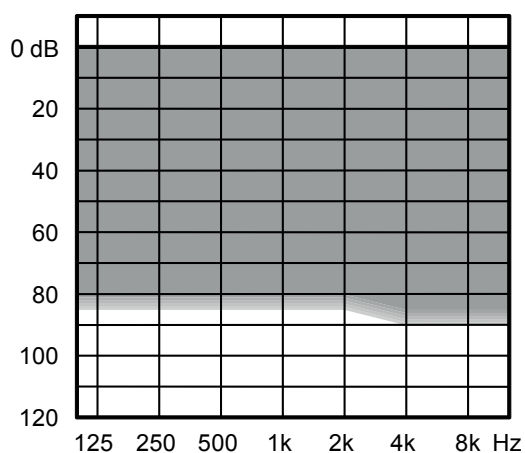

STANDARDTEKNOLOGI

- WIDEX MOMENT™-plattform med Personal Gain Integrator og ZeroDelay™-teknologi
- Widex PureSound™ – nytt paradigme i lydbehandling
- TruAcoustics™ for bedre lyd og tilpasning

VIKTIGSTE EGENSKAPER	440	330	220	110
Ytelse	*****	*****	****	**
Kanaler for bearbeiding og finjustering	15	12	10	6
Widex PureSound™ med ZeroDelay™-teknologi	•	•	•	•
TruAcoustics™ med Personal Gain Integrator	•	•	•	•

TILKOBLINGSMULIGHETER

2,4 GHz-kontroll (Android og iOS)	•	•	•	•
2,4 GHz lydstreaming (iOS)*	•	•	•	•
WidexLink til DEX hørselstekniske hjelpemidler**	•	•	•	•
Telespole	•	•	•	•

APPER FOR iOS OG ANDROID

MOMENT-app med SoundSense Learn	•	•	•	•
MOMENT-appen	•	•	•	•
TONELINK-app	•	•	•	•
COM-DEX-app	•	•	•	•


FUNKSJONER

Tilpasningsbehandling	•	•	•	•
Fluid Sound Analyzer (lydklasser)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programmer	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
Høyfrekvens-boost	•			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
Digitalt ytre øre	•	•		
HD Locator	•	•	•	
TruSound impulslydreduksjon	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Preferanseinnstillinger	•	•	•	•
Programmerbar trykknapp***	•	•	•	•
Soft Level-støyreduksjon	•	•	•	•
Støyreduksjon	•	•	•	•
ZEN IE	•	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•	•


* Klar for direkte Android-streaming. ** Inkluderer også DEX hørselstekniske hjelpemidler: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM + DEX, TV-PLAY. *** Programmerbar: Som programknapp og av/på-bryter, som lydjusteringsknapp og av/på-bryter, som dedikert på/av-bryter.

For informasjon om hvilke enheter WIDEX MOMENT, direkte streaming, er kompatibel med, kan du gå til: global.widex.com/compatibility


MAKSIMAL UTGANG – ØRESIMULATOR

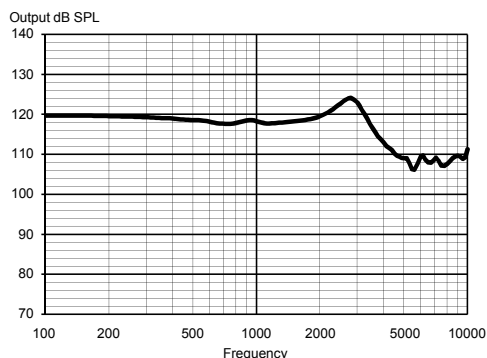


MAKSIMAL UTGANG – 2CC-KOBLING

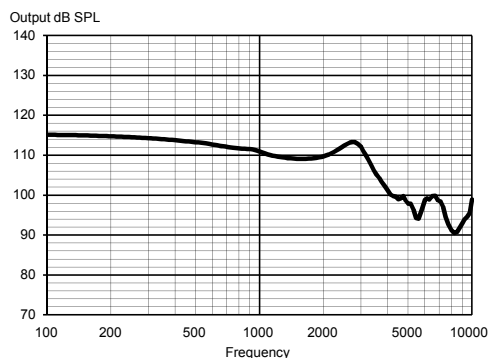

UTGANG – ØRESIMULATOR

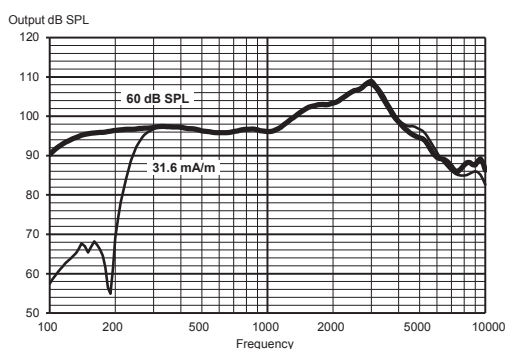

UTGANG – 2CC-KOBLING

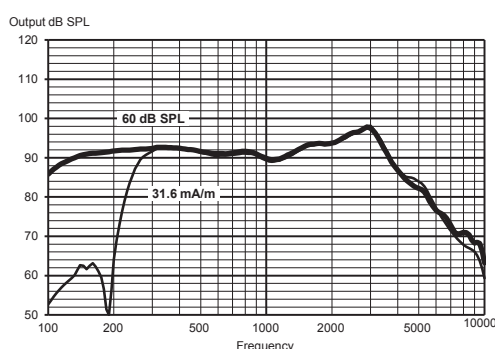

Tekniske data:

Typiske data innhentet ved standardmålinger av ren tone. Høreapparat satt til Compass Reference Test Gain, med mindre annet er angitt. Målt ved bruk av en standard ITE-kobling uten voksfiltre. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Widex via global.widex.com.

		ØRESIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC-KOBLING IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Topp Gjennomsnitt	118 dB SPL 124 dB SPL 118 dB SPL	108 dB SPL 114 dB SPL 110 dB SPL
Lydeffekt (Inngang 60 dB SPL)	1600 Hz Topp Gjennomsnitt	103 dB SPL 108 dB SPL 99 dB SPL	93 dB SPL 98 dB SPL 93 dB SPL
Full-on gain (Inngang 50 dB SPL, Compass Full-on gain)	1600 Hz Topp Gjennomsnitt	61 dB 69 dB 62 dB	52 dB 58 dB 55 dB
Teleslyngeutgang (Inngang 31,6 mA/m)	1600 Hz Topp Gjennomsnitt	103 dB SPL 108 dB SPL 99 dB SPL	93 dB SPL 98 dB SPL 93 dB SPL
Akustisk frekvensområde		100–10 000 Hz	100 Hz – 7000 Hz
Harmonisk forvrengning (typisk)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <2 %	<2 % <2 % <2 %
Ekvivalent inngangsstøy		21 dB SPL	21 dB SPL
Tapping av batteriet (standby)		1,00 mA	1,00 mA
Tapping av batteriet*		1,02 mA	1,04 mA
Batterilevetid (type 312 Zn-Air, 170 mAh)*		165 timer	165 timer
Mobiltelefonimmunitet (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -21/-19/-9 dB SPL	U-klassifisering: M4/T4

*Batterilevetid i virkelige situasjoner avhenger blant annet av høreapparatfunksjonene som brukes, streamingtid og kvaliteten på batteriet som brukes.

Ikke modifier dette utstyret uten tillatelse fra produsenten. Reservedeler og instruksjoner for riktig reparasjon kan kjøpes fra Widex.